



ஹார்ட் மானிட்டரை நோயாளி சயமாகப் பொருத்திக் கொள்வதற்கான வழிகாட்டி

உதவிக்கு 0345 6080542 ஐ அழைக்கவும் திங்கள் - வள்ளி காலலை 9:00 - மாலலை 5:00 மானிட்டரலை கீழ்க்கண்ட நரேத்துக்கு அணியாங்கள்:

24 மணி நரேங்கள்	48 மணி நரேங்கள்	72 மணி நரேங்கள்	7 நாட்கள்
-----------------	-----------------	-----------------	-----------

இந்த மானிட்டர் உங்கள் இதயத்தின் தொடர்ச்சியான பதிவை எட்கும், இதனால் உங்களுக்கு அறிகுறிகளலை உண்டாக்குவது எது என்று உங்கள் மரூத்துவர் விரலவாகவும் தூல்லியமாகவும் மரூத்துவ ஆய்வு சய்ய மூடியும். மானிட்டர் வீட்டிலயே எளிதில் சயமாகப் பொருத்தக்கூடியவாறு வடிவமலைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருத்தியுள்ள காலத்தில் தயவூசய்யுது உங்கள் சாதாரண சயல்பாட்களலைச் சய்யுங்கள்; இதன் பொருள் என்னவென்றால் நீங்கள் அதலை கழற்றாமல் உடற்பயிற்சி சய்யலாம் மற்றும் ஓவரில் கூளிக்கலாம் (தயவூசய்யுது நீந்தவலே மூழ்கிக் கூளிக்கவலே வணேட்டாம்). மூக்கியம்: தயவூசய்யுது காலலை 9:00 - மாலலை 5:00 அதலே நாளில் அல்லது அடூத்த வலலை நாளில் பொருத்தவாம்

1

வீடியலேவைப் பார்க்கவும் & பயன்பாட்டலைப் பதிவிறக்கவும்

மானிட்டரலைப் பொருத்துவதற்கூ மூன்பூ, மூடியாமானால், எங்கள் சிறிய வீடியலேவைப் பாருங்கள்: www.ecg-od.com/fitting

இந்த வழிமூறலைகளைக் கவனமாகப் படியாங்கள். உங்களால் மூடிந்தால், QR கூறியீட்டலை ஸ்கனே சய்ய்வதன் மூலம் டயரி பயன்பாட்டலைப் பதிவிறக்கவும் அல்லது ஈ.சி.ஐ-ஓ.பி (ECG-OD) டயரிக்கான ஆப்/ப்ளலே ஸ்டூரில் தலூங்கள்.

உங்கள் அறிகுறிகளலை உங்கள் ஸ்மார்ட்பூனில் பதிவூ சய்யுங்கள். அதற்கூ மாற்றாக, தரப்பட்டுள்ள காகித டயரியலைப் பயன்படூத்தவாம்.

2

படெட்டியில் உள்ள பொருட்கள்

கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் உங்களிடம் இரூக்கிறதூ என்று சரிபார்க்கவும்:


- ஹார்ட் மானிட்டர் (கூபிள் உட்பட)
- ஈ.சி.ஐ ளலகெட்ரூட்கள் (உபரியாக ஓட்டும் பட்டலைகள்)
- ஆல்கஹால் வலைப் (சரூமத்தலை சூத்தம் சய்ய)
- ரலூரை (மூடியலை அகற்ற)
- காகித டயரி (அறிகுறிகளலைப் பதிவூ சய்ய)
- திரப்பி அணப்பூவதற்கான உறலை



3

தலூலை தயார் சய்யுதல்

மூக்கியம்: மானிட்டர் பொருத்தப்படும் இடத்தில் ஏதனூம் மாய்ஸூசரலைசர், எண்ணயெ அல்லது அழகூப் பொருட்கள் பயன்படூத்தப்பட்டிரூந்தால், இந்த தயாரிப்புகளலை அகற்ற தயவூசய்யுது அடூத்த தலூல் தயாரிப்பு நிலலைகலூக்கூ மூன்னர் சலூப்பு மற்றும் தண்ணூரலைப் பயன்படூத்தவாம் (அதன் பின்னர் நன்கூ உலர்த்தவாம்).

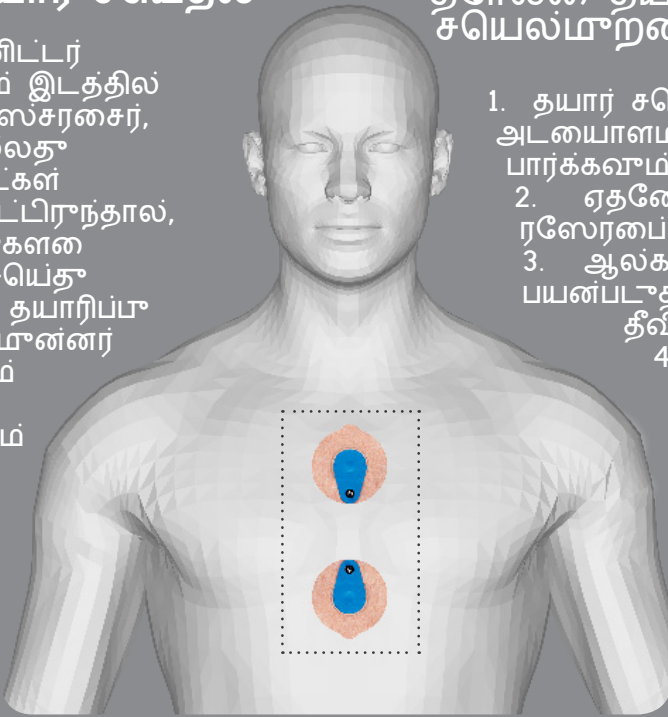

தலூலை தயார் சய்யுயும் சய்யல்மூறலை:


1. தயார் சய்ய வணேட்டிய பகூதிகளலை அடயாளம் காணவாம் (இடதூ பக்கம் பார்க்கவும்)
2. ஏதனூம் மூடி இரூந்தால் ரலூரலைப் பயன்படூத்தி அகற்றவாம்
3. ஆல்கஹால் வலைப்-ஐப் பயன்படூத்தி அந்த பகூதியலைத் தீவிரமாக சூத்தம் சய்யுங்கள்
4. எந்தவலூரூ தூப்பூரவூ சய்யுயும் திரவத்தயலூயும் 2 மூழூ நிமிடங்கலூக்கூள் இயற்கலயாக ஆவியாக அணமதிக்கூம்படி சரூமத்தலை உலர வலைகலூம்



4

ஹார்ட் மானிட்டரை இணைப்பது

- எலக்ட்ரோட்களிலிருந்து பின்புறத்தை கவனமாக அகற்றி, வலதுபுறத்தில் உள்ள வரபைடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபி பொருத்தவும்
- தலோல் தொடர்பை உறுதிப்படுத்த, எலக்ட்ரோட் விளிம்புகளை மென்மையாக்காங்கள், ஆனால் மையங்களில் அழுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்

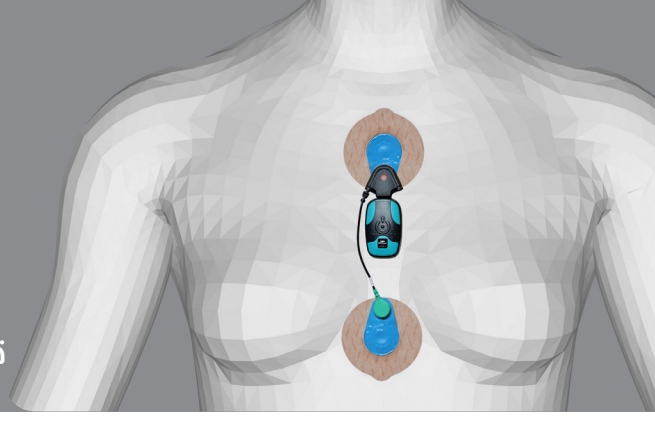

5

மானிட்டரதைத் துவங்குதல்

- தலோலில் தொடர்பு ஏற்பட்டவாடன சாதனம் தன்னியக்கமாகத் தொடங்கும். அது வறெறிகரமானால், ஒவ்வொரு 5 வினாடிக்ம் ஒரு பச்சை விளக்கு ஒளிருவதை (இதய ஐகானில்) நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். ஒளிருவது மங்கலாக இருக்கிறது, எனவே நீங்கள் வளளிச்சமான இடத்தில் இல்லலை என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள்
- ஒளி திரெயவில்லை என்றால், 0345 6080542 எண்ணில் ஹெல்ப்லைனை அழகைக்கவும் (திங்கள்-வளெளி காலலை 9:00 மணி முதல் மாலலை 5:00 மணி வரலை திறந்திரக்கம்)



6


எலக்ட்ரோட்களை மாற்றுவது

ஒரு எலக்ட்ரோட் தளர்வாக வந்தால், கொட்க்கப்பட்ட மாற்று பாகங்களைப் பயன்படுத்தி அதலை மாற்றவும். எலக்ட்ரோட்கள் எளிய அழுத்தக்கூடிய கூமிழ்களைப் பயன்படுத்தி கபேளடன் இணைக்கப்படுகின்றன. உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக் கூடிய தலோல் எதிர்வினை இருந்தால், மானிட்டர் மற்றும் எலக்ட்ரோட்களை அகற்றி விட்டு ஹெல்ப்லைனை அழகைக்கவும்.

7

உங்கள் அறிகுறிகளைப் பதிவு செய்யவும்

ஏதனோம் காறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகளும் அவற்றின் நரேங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டால் அது உங்கள் நரோயறிதலுக்கே உதவும். ஸ்மார்ட்போன் ஆப் அல்லது அச்சிடப்பட்ட டயரியைப் பயன்படுத்தவும்.

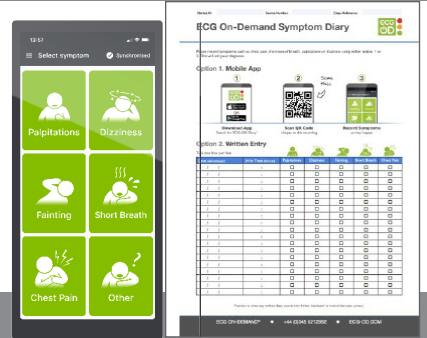

8

பதிவு செய்வதை மாடித்தல்

வறெுமனடே மானிட்டர் மற்றும் கபேளலை அகற்றவும். தலோலில் இருந்து இரண்டு எலக்ட்ரோட்களை மதெுவாக அகற்றி அப்புறப்படுத்துங்கள் (ஆனால் கபேள் அல்லது சாதனத்தலை அல்ல).

9

அஞ்சல் அலுவலகம் வழியாக மட்டுமே மானிட்டரை திராப்பி அனுப்ப வேண்டாம்

உறயலை உங்கள் உள்ளூர் தபால் நிலயைத்திற்கு எடுத்துச் சனென்று அதகைக் கவாண்டரில் ஒப்படகைக்கவும் - டலெலிவரிக்கான சலெவுகள் எதுவும் இல்லலை மற்றும் சவேலை இலவசமாகும்.

திராப்பி அனுப்புவது ஒரு கண்காணிக்கப்பட்ட சவேலை வழியடே செய்யப்படுகிறது, எனவே ஒரு தபால் பட்டியலைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

கொட்க்கப்பட்ட உறகைளில் பின்வராவலை திராப்பி அனுப்பப்படுவதை உறுதி செய்யவும்:

1. நரோயாளி காகித டயரி (பயன்படுத்தியிரந்தால்)
2. ஹலோல்டர் மானிட்டர் (கபேள் உட்பட)

